

BEHANDLUNG MIT SOLUTIONS MICRONEEDLING NANO-MESO THERAPY

Vorbereitung

- Reinigen Sie die zu behandelnde Hautpartien gründlich und verwenden Sie bitte ein alkoholhaltiges Tonic/Gesichtswasser. Anschließend desinfizieren Sie die entsprechenden Hautpartien mit einem Hautdesinfektionsmittel.
- Wenn Sie Verletzungen oder Irritationen durch die Rasur haben, bitte warten Sie ab bis diese verheilt sind.
- Achten Sie darauf, dass ein Aufsatz **IMMER NUR** für die gleiche Person verwendet wird (Ersatz-Aufsätze können zugekauft werden).

Behandlungsplan MicroNeedling Meso Therapy (Profi-Nadel-Aufsatz)

- Setzen Sie den Profi Needling-Aufsatz ein.
- Wählen Sie die Intensitätsstufe (Eindringtiefe). Bei sehr dünnen Hautpartien bitte die Intensitätsstufe reduzieren.
- Die Auswahl der Intensitätsstufe erfolgt je nach Hauttyp und Alter – je älter bitte umso vorsichtiger anwenden. Ab 60 Jahren auf dem Hals nur noch Eindringtiefe 0,25 mm anwenden.
- Wählen Sie die Geschwindigkeit
- Die Auswahl der Geschwindigkeit erfolgt nach eigenem Empfinden, viele Menschen empfinden eine höhere Geschwindigkeit als angenehmer.
- Setzen Sie das Gerät ohne Druck auf die Haut auf und behandeln Sie die Hautareale ohne zu gleiten oder zu kreisen, **IMMER** aufsetzen und wieder absetzen. Nur mit dem Nano Aufsatz können Sie auch leicht über die Haut gleiten.

- Bitte beachten Sie folgende Behandlungszeiten genau:

Eindringtiefe	Behandlungszeit
0,25 mm	maximal 5 Sekunden auf einer Stelle anwenden
0,5 mm	maximal 4 Sekunden auf einer Stelle anwenden
0,9 mm	maximal 3 Sekunden auf einer Stelle anwenden

Bitte nur leicht aufsetzen, keinen Druck ausüben!

· **NICHT auf oberflächlichen Gefäßen/ Couperose anwenden!**

Nach der Behandlung kann die Haut gerötet sein. Die Erscheinungen sind harmlos und klingen schnell ab. Sie können die Hautpartien kühlen. Bitte am gleichen Tag der Behandlung keine Pflegeprodukte benutzen. Sollten die Erscheinungen nach 3 Tagen nicht abgeklungen sein, bitte Ihren Arzt konsultieren.

Behandlungsplan MicroNeedling Nano Therapy (Nano-Nadel-Aufsatz)

- Setzen Sie den Nano-Aufsatz ein und ziehen Sie die Schutzkappe ab.
- Schrauben Sie den Kopf ab (halten Sie hierbei den Behälter/ Füllkammer des Aufsatzes fest).
- Befüllen Sie die Füllkammer mit einem Serum Ihrer Wahl (keine Creme oder Lotion).
- Schrauben Sie nun den Kopf des Nano-Aufsatzes wieder auf (bitte auch hier wieder den Behälter/Füllkammer des Nano-Aufsatzes festhalten).
- Vor Beginn der Anwendung wählen Sie bitte erst die höchste Geschwindigkeitsstufe, halten das Handstück komplett senkrecht nach unten und bewegen es einige male über Ihren Handrücken bis das Serum Ihrer Wahl aus der Füllkammer zu fließen beginnt. Dies kann etwas dauern.
- Wählen Sie nun die gewünschte Geschwindigkeitsstufe.
- Die Auswahl der Geschwindigkeitsstufe erfolgt je nach Viskosität des Serums. Grundsätzlich gilt je dickflüssiger das Serum, desto höher Geschwindigkeitsstufe. Falls Sie eine niedrigere Geschwindigkeitsstufe vorziehen (z. B. Stufe 1) bitte ein sehr dünnflüssiges Serum verwenden.
- Setzen Sie das Gerät ohne Druck auf die Haut auf und behandeln Sie die Hautareale. Gleiten Sie hierbei kreisförmig leicht über die Haut (ca. 3 x pro behandelndem Hautareal)
- **NICHT auf oberflächlichen Gefäßen/Couperose anwenden!**

Auch bei der Nano Therapy kann nach der Behandlung die Haut gerötet sein. Die Erscheinungen sind harmlos und klingen schnell ab. Sie können die Hautpartien kühlen. Bitte am gleichen Tag der Behandlung keine Pflegeprodukte benutzen. Sollten die Erscheinungen nach 3 Tagen nicht abgeklungen sein, bitte Ihren Arzt konsultieren.

PFLEGEHINWEISE

Reinigung des Gerätes

- Um Ihr Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:
- Reinigen Sie das Gerät **NUR** mit einem weichen Tuch (nebelfeucht)
- Beide Aufsätze vor und nach jeder Anwendung mit einem Desinfektionsspray reinigen.
- Die Füllkammer des Nano-Aufsatzes bitte nach jeder Behandlung mit Wasser ausspülen und danach zusätzlich mit einem Desinfektionsspray reinigen.
- Lassen Sie den Behälter auf einem Handtuch trocknen bevor Sie den Kopf wieder aufschrauben und die Schutzkappe aufsetzen.
- Trocken lagern bei normaler Temperatur

ENTSORGUNG

Ausgediente Altgeräte, Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll geben, sondern an einer Sammelstelle abgeben.

Entsorgungshinweis



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.




DR. FUCHS COSMETICS
SOLUTIONS MICRONEEDLING
NANO-MESO THERAPY

M.A.N.Z. GmbH Landsberger Str. 400 81241 München
Service-Nr.: +49 2575 616 014 1

Technische Daten:

Bitte verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.

Gerät:

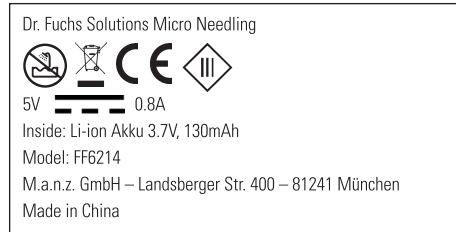

INHALT SET

Handstück
Ladeadapter
3 Profi-Nadel-Aufsätze
2 Nano-Nadel-Aufsätze (befüllbar)

WARNHINWEISE

Bitte verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit chemischen oder mechanischen Peelings. Dies kann Ihre Haut und das Gerät beschädigen.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Bei einer Beschädigung des Gerätes bitte nur von einem Fachmann reparieren lassen.

Bei Folge-, Sach- oder Personenschäden, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Das Gerät ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten. Von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, darf das Gerät nur benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden.

Das Gerät bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren

geeignet. Kinder zwischen 15 und 18 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener anwenden.

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Die Warnhinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

NICHT ANWENDEN

In folgenden Fällen darf das Gerät nicht angewendet werden. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt/Ihre Ärztin.

- Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.
- Bitte das Gerät im Bereich der Augen/Augenbrauen NUR mit dem Nano-Aufsatz anwenden
- Wenn Sie unter Hauterkrankungen leiden und/oder oder Hautirritationen in den zu behandelnden Bereichen haben
- Auf Couperose und Rosazea
- Wenn Sie Hautkrebs hatten oder haben
- Wenn Sie atypische Muttermale, Tätowierungen, Feuermale, Permanent Make up in den zu behandelnden Bereichen haben
- Wenn Sie unter überschießender Narbenbildung leiden (Kelloidbildung)
- Wenn Sie unter Krampfadern und Gefäßerweiterung leiden
- Bei Infektionen, Ekzemen, Wunden, Herpes, Blutergüssen
- Nach Operationen
- Bei Epilepsie
- Bei Diabetes, Lupus Erythematodes, Immunschwäche (inklusive HIV oder AIDS)
- Bei Einnahme von Medikamenten (AHAs, BHAs, Isotretinoin, Azelainsäure) im Zweifel Ihren Arzt fragen
- Bei Einnahme von Schmerzmitteln, auch bei hochdosierter Aspirin-Einnahme
- Bei Einnahme von Immunsuppressiva
- Wenn Sie unter Hämophilie leiden

SOLUTIONS MICRONEEDLING NANO-MESO THERAPY

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für das Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy entschieden haben. Dieses Beautygerät ist zur Verbesserung der Hautstruktur entwickelt und für den Hausgebrauch modifiziert worden.

Wie wirkt das Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy?

Durch die Anwendung des Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy entstehen minimalste Verletzungsreize der Haut, welche die Hautzellen stimulieren, ohne sie zu zerstören. Ein weiterer Effekt besteht darin, dass durch die zahlreichen

Nadelstiche eine Mehrzahl von Mikrokanälen geöffnet wird, die den hautstraffenden Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, Vitamin-Cocktails mit Antioxidantien o.ä. erlauben, tief in das Gewebe einzudringen. Diese Substanzen fördern Regenerationsprozesse in das tiefer liegende Gewebe. Als Ergebnis – die Haut wird fester und die Gesichtskonturen werden straffer.

Wofür eignet sich Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy?

Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy ist ein universales Gerät, das die natürliche Regeneration der Haut anregen kann und für die Faltenbehandlung eingesetzt werden kann. Vor allem Stirnfalten, Zornesfalte, Raucherfältchen, Oberlippenfältchen, Mundwinkelfalten, Kinn- Hals- und Dekolleté-Falten lassen sich mit dem kleinen Gerät optisch reduzieren. Bei der Faltenbehandlung mit Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy ist es besonders effektiv und vorteilhaft, Hyaluronsäure zu verwenden. Sie fördert nicht nur regenerative Prozesse der Zellen, sondern speichert Feuchtigkeit und polstert die Haut optisch auf.

Anwendungsgebiete

- Faltenreduktion
- Besserung von Pigmentstörungen
- Hauttraffung/Hautfestigung
- Narbenbehandlung (z. B. Akne)
- Behandlung sonnengeschädigter Haut
- Porenverfeinerung
- Behandlung von Dehnungsstreifen

Wie verläuft die Behandlung mit dem Solutions MicroNeedling Nano-Meso Therapy?

Zunächst werden die zu behandelnden Hautareale gründlich gereinigt. Anschließend verwenden Sie bitte ein alkoholhaltiges Tonic und danach ein Hautdesinfektionsmittel, um die Haut zu desinfizieren. Auf die gereinigte und desinfizierte Haut trägt man nun ein Serum auf, das mit Wirkstoffen angereichert ist.

Bitte ein Hyaluronsäure-Serum verwenden, welches keine Konservierungsstoffe enthält die Irritationen hervorrufen können. Zu diesem Zweck haben wir ein passendes, hochkonzentriertes Hyaluron-Serum entwickelt. Dieses ist mit medizinischem Alkohol konserviert und kann vor und nach dem MicroNeedling verwendet werden.

Mit feinen Nadeln, die aus medizinischem Edelstahl bestehen, werden die Mikrokanäle der Haut geöffnet, so dass die aufgetragenen Wirkstoffe schneller in die tieferen Hautschichten eindringen.

Anzahl der Behandlungen MicroNeedling/Meso Therapy:

Insgesamt 6 Behandlungen. Der Abstand der einzelnen Behandlungen sollte 4–6 Wochen betragen. Um das Ergebnis zu erhalten, anschließend eine Behandlung alle 6 Monate durchführen.

MicroNeedling/Nano Therapy:

Die Behandlung kann ganzjährig 1 x pro Woche durchgeführt werden.

BEDIENUNG IHRES SOLUTIONS MICRONEEDLING NANO-MESO THERAPY

Beachten Sie vor Anwendung die Warnhinweise und in welchen Fällen Sie das Gerät nicht anwenden dürfen.

Gerät aufladen

Vor der ersten Anwendung laden Sie das Handstück komplett auf. Verbinden Sie hierzu das Handstück an der Bodenfläche mit dem Netzstecker.

Die Gesamtdauer für einen kompletten Ladevorgang beträgt ca. 30–50 min. Sobald die Lampe dauerhaft blau leuchtet ist der Ladevorgang beendet.

Die Laufzeit bei vollem Ladezustand beträgt in der höchsten Stufe ca. 40 min.

Laden Sie das Gerät erneut auf, sobald der Akku leer ist bzw. das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt.

Gerät ein-/ausschalten, Aufsätze einsetzen und Stufen einstellen

Entfernen Sie das Gerät vom Stromkreis

Wählen Sie einen der mitgelieferten Needling-Aufsätze (entweder den Nano-Nadel-Aufsatz mit silberfarbener Fläche und Füllkammer oder den Profi-Nadel-Aufsatz mit 9 feinen Nadeln) und setzen Sie diesen ein in dem Sie ihn aufschrauben.

Bei der Meso Therapy (Profi-Nadel-Aufsatz) wählen Sie die Eindringtiefe indem Sie die Halterung des Kopfes nach rechts drehen und entsprechend einstellen (0,25, 0,5, oder 0,9).

Auch bei der Nano Therapy (Nano-Nadel-Aufsatz) können sie die Stufen wie oben beschrieben wählen. Hierbei erhöhen Sie die Abrasion auf der Haut.

Drehen Sie das untere Ende des Handstücks nach rechts, um das Gerät auf Stufe 1 einzuschalten. Stellen Sie die Geschwindigkeit ein indem Sie das untere Ende weiter nach rechts drehen (Stufe 2 oder 3). Die Auswahl der Geschwindigkeit (Stufe 1, 2 oder 3) erfolgt nach dem persönlichen Empfinden, viele Menschen empfinden eine höhere Geschwindigkeit als angenehmer.

Um das Gerät wieder auszuschalten drehen Sie das Ende des Handstücks wieder nach links auf 0.