

### Ultraschallanwendung Gesicht - alleine mit und ohne Schwammaufsatz

Es gibt 2 Möglichkeiten der Ultraschallanwendung im Gesicht Mit dem Schwamm und Ultraschall eine Creme oder Serum ohne großen Druck in die Haut einarbeiten. Achten Sie darauf, dass genug Ihres Serums oder Ihrer Creme aufgetragen wird (ca. eine erbsen- bis haselnussgroße Menge), damit der Ultraschallkopf Kontakt mit der Haut bekommt. Anwendungsdauer 60 Sekunden für das gesamte Gesicht.

Ohne den Schwamm gibt es mehrere Bereiche, auf denen man den Schallkopf gezielt Punkt für Punkt ansetzen kann, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei handelt es sich um

- die Stirnmitte
- den Bereich über den Augenbrauen
- die beiden Punkte am äußeren sowie am inneren Augenwinkel
- den Bereich Unterseite Nasenflügel um die Lippen herum bis zum Kinn runter
- den Bereich zwischen Nase und Oberlippe

### Die Behandlung läuft wie folgt ab:

1. Reinigen Sie das Gesicht zunächst sorgfältig auf gewohnte Art.
2. Entfernen Sie die Bürste vom Gerät.
3. Tragen Sie nun das gewünschte Produkt (Creme, Gel oder Serum) dünn auf das Gesicht auf und massieren Sie dieses sanft ein.
4. Streichen Sie anschließend jeweils eine dünne Cremeschicht (oder Gel/Serum) auf die entsprechenden Bereiche, ohne sie einzuarbeiten und beschallen Sie diese Cremeschicht jeweils für etwa 10 Sekunden pro Punkt.  
Die Creme (oder Gel/Serum) muss nicht abgewaschen werden.

### Ultraschallanwendung Körper

Mit dem großen Ultraschallkopf ein Gel oder eine Creme ohne großen Druck in die Haut einarbeiten. Achten Sie darauf, dass genug Ihres Gels oder Ihrer Creme aufgetragen wird (je nach Größe des Körperareals eine ca. trauben- bis walnussgroße Menge), damit der Ultraschallkopf Kontakt mit der Haut bekommt. Anwendungsdauer 2 Minuten pro Körperareal.

Es gibt mehrere Bereiche, auf denen man den Schallkopf gezielt Punkt für Punkt ansetzen kann, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei handelt es sich um

- Hals und Dekolleté
- Oberarme
- Unterbauch
- Gesäß
- Oberschenkel Innen- und Außenseiten
- den Bereich der Knie

### Die Behandlung läuft wie folgt ab:

1. Tragen Sie nach dem duschen Ihre Körpercreme oder Bodylotion wie gewohnt auf und arbeiten Sie diese gut ein.
2. Streichen Sie nun jeweils eine dünne Schicht Ihres gewünschten Produkts (Creme oder Gel) auf das entsprechende Körperareal, ohne es einzuarbeiten und beschallen Sie dieses Areal für jeweils 2 Minuten.

Die Creme oder das Gel muss nicht abgewaschen werden.

### AUSWECHSELN DER BÜRSTENKÖPFE

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir den Bürstenkopf alle 3 Monate auszuwechseln.

Bürstenkopf abnehmen: Bürstenkopf abziehen. Vom Gerät wegziehen.

1. Setzen Sie den Bürsten-oder Schwammkopf leicht auf das Gerät auf.
2. Drehen Sie den Bürsten-oder Schwammkopf mit leichtem Druck nun nach links oder rechts, bis die 2 Stopfen auf der Rückseite des Bürsten-oder Schwammkopfes mit den 2 Einkerbungen am Plastikring zusammentreffen und einrasten.
3. Drücken Sie den Aufsatz nun mit etwas Druck fest, bis Sie ein Klicken hören. Zum Auswechseln ziehen Sie den Aufsatz einfach wieder vom Gerät ab.

### AUSWECHSELN DER ULTRASCHALLKÖPFE

Ultraschallkopf abnehmen: Nehmen Sie den Kopf, drehen Sie diesen eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab (vom Gerät wegziehen).

Ultraschallkopf anbringen: Ultraschallkopf in die dafür vorhergesehenen Aussparungen einsetzen. Drehen Sie nun eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

### PFLEGEHINWEISE

#### Reinigung des Gerätes

Um Ihr Solutions UltraSonic Body & Face Deep Care & Cleansing System in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung Ihres Gerätes. Teile des Gerätes dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Um den Bürstenkopf nach der Anwendung zu reinigen nehmen Sie ein Handtuch und trocknen Sie damit die Borsten rund 5–10 Sekunden, während das Gerät läuft. Wahlweise können Sie den Bürstenkopf auch abnehmen und ihn lufttrocknen lassen. Einmal pro Woche sollten Sie den Bürstenkopf abnehmen und alles gründlich mit warmem Wasser und Seife abspülen, um Rückstände zu vermeiden.

#### Reinigung der Ladestation

Säubern Sie die Ladestation mit einem weichen, trockenen Lappen. Nicht mit Wasser abspülen.

### ENTSORGUNG

Ausgediente Altgeräte, Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll geben, sondern an einer Sammelstelle abgeben.

#### Entsorgungshinweis



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.




DR. FUCHS COSMETICS

SOLUTIONS ULTRASONIC BODY & FACE  
DEEP CARE & CLEANSING

## Typenschild Gerät:

Dr. Fuchs Cosmetics Solutions UltraSonic Body & Face Deep Care & Cleansing

M.a.n.z. GmbH  
Landsberger Str. 400, 81241 München  
Ultrasonic Brush Set-FF7318S  
Input: 5V  1A  
Inside: Li-Ion Akku 3.7V, 1,000mAh  
M.a.n.z.



## Adapter:

### SIMSUKIAN


#### AC/DC ADAPTER

MODEL: SK01G-0500080Z

INPUT: AC100-240V ~

50/60Hz 0.2A Max

OUTPUT: 5V  1A

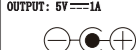

MADE IN CHINA  
M.a.n.z. GmbH,  
Landsberger Str. 400,  
81241 München

## INHALT SET

- 1 Handstück
- 1 Ladestation/Adapter
- 1 Bürstenkopf für normale Haut (rosé/weiß)
- 1 Bürstenkopf für sensible Haut (weiß)
- 1 Schwammaufsatz
- 1 Kleiner Ultraschallkopf für das Gesicht
- 1 Großer Ultraschallkopf für den Körper

## WARNHINWEISE

Bitte verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Bei Folge-, Sach- oder Personenschäden, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Das Gerät ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten.

Bei einer Beschädigung des Gerätes bitte nur von einem Fachmann reparieren lassen.

Von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, darf das Gerät nur benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden.

Das Gerät bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

Kinder zwischen 15 und 18 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener anwenden.

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Die Warnhinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## NICHT ANWENDEN

In folgenden Fällen darf das Gerät nicht angewendet werden. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt / Ihre Ärztin.

· Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

· Nicht auf entzündlich verändertem Gewebe oder offenen Wunden anwenden.

· Die Bürste nicht direkt auf Couperose oder Rosazea anwenden.

· Bei Herzschrittmacher-Trägern nicht in der Nähe des Schrittmachers anwenden.

· Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

· Nicht direkt auf die Augen aufsetzen (maximal unter den Augenbrauen und am Augenrand).

## SOLUTIONS ULTRASONIC BODY & FACE DEEP CARE & CLEANSING

### Wunderschöne Haut in nur 60 Sekunden pro Tag

Eine porentiefe Reinigung der Haut ist die Grundvoraussetzung für effektive Pflege. Das Solutions UltraSonic Body & Face Deep Care & Cleansing unterstützt Sie dabei sehr effektiv.

Pigmentflecken, Mitesser, Falten, schlaffe Haut und Cellulite lassen uns älter aussehen. Das Erscheinungsbild der Haut im Gesicht und am Körper kann mit einer Ultraschallbehandlung optisch verbessert werden. Darüber hinaus kann die Wirkung von Anti-Aging Produkten mit einer Ultraschallbehandlung verstärkt werden, das ist in der Anti-Aging Behandlung hinreichend bekannt.

### Was bewirkt Ultraschall in der Haut?

Bei Ultraschall handelt es sich um Schallwellen, die das menschliche Ohr nicht hören kann. Die Vibrationen oder Schwingungen des Ultraschalls werden, zum Beispiel im kosmetischen Bereich, mittels eines Schallkopfes erzeugt.

Die Frequenz des Ultraschallkopfes liegt bei kosmetischen Anwendungen bei 3 MHz. Das heißt, dass der Schallkopf mit 3 Million Schwingungen pro Sekunde arbeitet. Bewegt man den Schallkopf nun über die Haut, dann passieren im Wesentlichen folgende Dinge:

### 1. Vibration und Erwärmung

Zunächst erzeugen die schnellen Vibrationen eine Art Reibung auf der Haut, die wiederum sorgt für eine Erwärmung, die man aber nicht stark spürt. Die Vibrationen üben zudem einen Massageeffekt auf das Gewebe aus.

Das ist nicht nur entspannend, sondern regt auch den Blutfluss und den Stoffwechsel an.

### 2. Abtransport von Stoffwechselprodukten

Durch den angeregten Stoffwechsel können Stoffwechselprodukte schneller abtransportiert werden, und das wiederum hilft der Haut bei der Regeneration.

### 3. Öffnung der Hautporen

Ultraschallwellen können die Poren öffnen, wodurch es einfacher ist, kleine Härchen oder Mitesser zu entfernen. Darüber hinaus können auf diese Weise pflegende Cremes, die während der Behandlung mit dem Ultraschall-Gerät auf die Haut aufgetragen werden, besser und tiefer in die Haut eindringen. Die Wirkung von pflegenden oder aufbauenden Substanzen wird somit erhöht.

### 4. Anti-Aging

Ultraschallwellen können die Kollagen und Elastin Produktion anregen, Falten und Linien können geglättet werden, Poren werden verfeinert und Unreinheiten verbessert. Die Haut wird gestrafft und Gesichtskonturen werden definiert.

Ultraschallbehandlungen werden im Allgemeinen als sehr angenehm empfunden und sind absolut schmerzfrei. Verantwortlich für die wohltuende Wirkung sind der Massageeffekt und die entstehende, sanfte Wärme.

### Anwendungsgebiete

- Falten
- Schlaffe Haut
- Trockene Haut
- Fahle – schlecht durchblutete Haut
- Unreine Haut

Durch die Vibrationen haben Ultraschallbehandlungen nicht nur einen tiefenentspannenden Effekt auf das Gesicht und den gesamten Körper, sie können auch die Bildung von neuem Kollagen anregen. Und das braucht die Haut, um straff und prall zu sein.

Ist die Neubildung von Kollagen (bei einer Anti-Age-Behandlung gegen Falten) das Hauptanliegen der Behandlung, dann werden dazu noch Anti-Aging Cremes oder Seren auf das Gesicht aufgetragen. Schließlich können die Wirkstoffe dieser Cremes durch den Ultraschall besonders tief in die Haut eingearbeitet werden.

### Anzahl der Sitzungen

Insgesamt lässt sich das gesamte Hautbild mit dieser Behandlungsmethode deutlich verbessern.

Wie viele Behandlungen notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, hängt von der Ausgangssituation und vom angestrebten Ziel ab.

Grundsätzlich können Verbesserungen des Hautbildes schon nach etwa drei bis vier Wochen bei täglicher Behandlung festgestellt werden.

## BEDIENUNG IHRES SOLUTIONS ULTRASONIC DEEP CARE & CLEANSING SYSTEMS

Beachten Sie vor Anwendung die Warnhinweise und in welchen Fällen Sie das Gerät nicht anwenden dürfen.

### Gerät aufladen

Vor der ersten Anwendung laden Sie das Handstück komplett auf. Die Gesamtdauer für einen kompletten Ladevorgang beträgt ca. 3,5 Std.

Setzen Sie das Gerät in die Ladestation ein und verbinden Sie die Ladestation mit dem Netzstecker.

Die Lampe blinkt rot während des Ladeprozesses.

Sobald die Lampe dauerhaft rot leuchtet ist der Ladevorgang beendet.

Laden Sie das Gerät erneut auf, sobald der Akku leer ist bzw. das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt.

### Gerät ein- / ausschalten und Stufen einstellen

Drücken Sie die Ein/Aus (on/off) Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wird in der Stufe 1 eingeschaltet.

Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Stufe 2 zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um das Gerät auszuschalten.

Wiederholen Sie die Schritte, um zwischen den einzelnen Funktionen (Stufe 1, Stufe 2, aus) zu wechseln.

### Ultraschall einschalten / dazu schalten / ausschalten

Drücken Sie den Ultraschall (Ultrasonic) Taste, um die Ultraschall Funktion einzuschalten. Die Taste leuchtet grün, wenn die Ultraschall Funktion eingeschaltet ist.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Ultraschall Funktion auszuschalten. Die Taste leuchtet nicht mehr bei ausgeschalteter Ultraschall Funktion.

Die Ultraschall Funktion kann in jeder Stufe (Geschwindigkeitsstufen) ein- und ausgeschaltet werden, bei Stufe 1, bei Stufe 2 und bei ausgeschaltetem Gerät.

## ANWENDUNG IHRES SOLUTIONS ULTRASONIC BODY & FACE DEEP CARE & CLEANSING TÄGLICHE HAUTREINIGUNG MIT/OHNE ULTRASCHALL – NUR FÜR DAS GESICHT

· Entfernen Sie Ihr Augen Make-Up mit der Hand nicht mit der Bürste. Das Gerät bitte nicht auf die Augen aufsetzen.

· Tragen Sie Ihr Reinigungsprodukt großzügig auf die angefeuchtete Haut oder den Bürstenkopf auf.

· Drücken Sie die Ein/Aus Taste, um das Gerät einzuschalten.

· Bewegen Sie das Reinigungsgerät mit sanft kreisenden Bewegungen über die Haut. ACHTUNG: Bewegen Sie die Bürste lediglich mit leichtem Druck über Ihr Gesicht. Zu starker Druck kann die Effektivität der Reinigung beeinträchtigen.

· Wir empfehlen 20 Sekunden für die Stirn, 20 Sekunden für Nase und Kinn und 10 Sekunden auf jeder Wange.

· Entfernen Sie die Reste der Reinigungstextur gründlich mit Wasser.

Jede Haut hat individuelle Bedürfnisse. Passen Sie deshalb den Bürstenkopf an Ihren Hauttyp an, um ein optimales Reinigungs- und Pflegeergebnis zu erzielen. Wir haben für jeden Hauttyp einen passenden Bürstenkopf (z. B. fein, hart, Silikon oder Schwamm).